

CAMILLA DE TIJERA DE 8 POSICIONES AMARILLA/NEGRA A7

SKU: CAM001

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una camilla de tijera de 8 posiciones es un dispositivo esencial en situaciones de emergencia, diseñado para transportar a pacientes lesionados o enfermos de manera rápida y segura durante la **atención médica prehospitalaria**, equipada con características como correas de seguridad, almohadillas acolchadas, y diferentes niveles de alturas que proporciona comodidad al usuario.

MATERIALES

- Cuerpo de aluminio de alta resistencia.
- Goma de 50mm de Ancho y 15.3cm de diametro.
- Colchón impermeable vulcanizado de 9 cm de espesor.

COLORES

- Estructura Colchón
-
- Amarillo Negro Negro

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Camilla móvil fabricada en **aluminio de alta resistencia**.

Uso principal para **ambulancias**, hospitales y centros de emergencia.

Capacidad de carga **250 kg**.

Soporte para **tanque de oxígeno**.

Incluye **porta-sueros abatible**.

Sistema de **parachoques integrado**.

Dispositivo de fijación para ambulancia.

Solo **una persona puede subir** la camilla hacia la ambulancia sin paciente, **cuando se trae paciente en la camilla se necesitan dos personas**.

3 Cinturones de sujeción (Pecho, Cadera y Rodillas) y un **cinturón tipo chaleco**, para inmovilizar pecho y hombros.

Respaldo ajustable de 0° a 65° por sistema neumático.

Protecciones laterales abatibles para protección del paciente durante el traslado.

Colchón impermeable de 9mm de espesor.

Chasis de camilla tipo X, de fácil elevación al cargar.

Acabado en **pintura electrostática** de alta calidad.


Altura ajustable

Patas mecánicas con sistema de frenado por medio de mecanismo accionado por medio de los pies del operador.




MEDIDAS

Posición baja

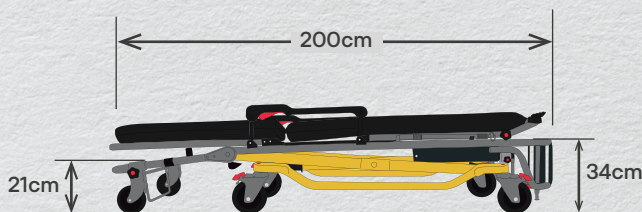


Posición alta

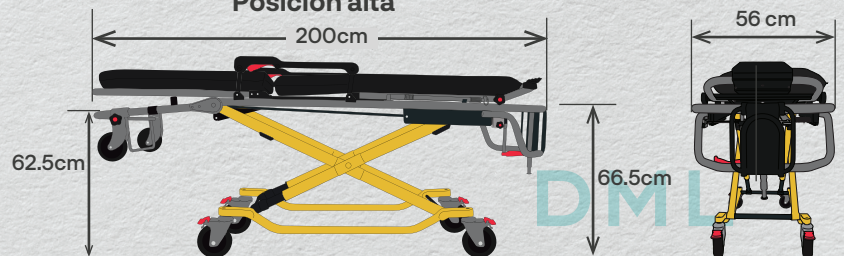


POSICIONES


Posición 1 (baja)

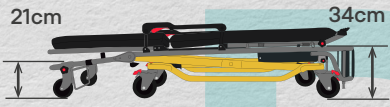


Posición 2

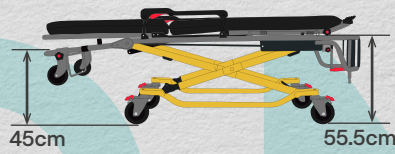


Posición 3

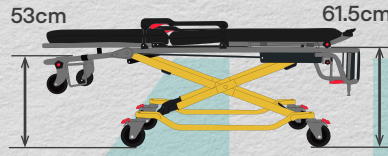


Posición 4 (alta)

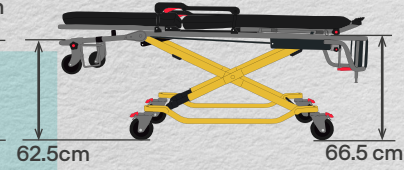


Posición 5

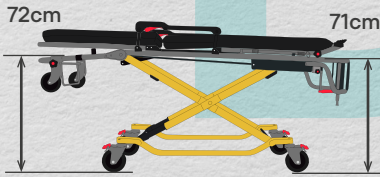


Posición 6

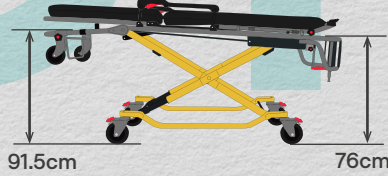

Posición 7

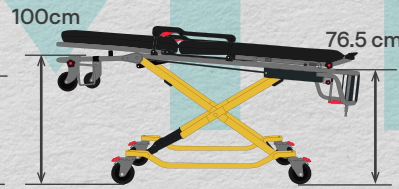

Posición 8

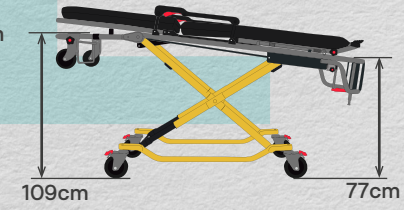

APLICACIÓN



ACCESORIOS

Sistema de fijación para la camilla en la ambulancia.



Cinturones de sujeción.



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com