

CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTES RX-01

SKU: CAM015

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



La camilla para traslado de pacientes RX-01 es esencial en ambientes médicos para mover pacientes con seguridad y comodidad. Fabricada en acero de alta calidad con sistema hidráulico integrado, proporciona una superficie estable y segura para el transporte de pacientes entre áreas dentro de instalaciones de salud.

MATERIALES

- Colchón de 6cm de espesor
- Chasis Fabricado en acero de alta calidad con sistema hidráulico integrado
- Cubierta inferior en plástico ABS

COLORES

Estructura Colchón



Blanco



Azul Marino

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Sistema de barandales abatibles de un solo movimiento



Panel posterior traslúcido a RX



Ruedas antichoques esquineras



Peso neto 70 kg



Manivela que controla la inclinación del reposapiernas.



Pedal para bloqueo de llantas en ambos lados de la camilla.

Portavenoclisis abatible



Respaldo ajustable de 0° a 75°



Soporte para tanque de oxígeno



Capacidad de carga de 250 kg






Pedal para posición trendelenburg y trendelenburg invertido



Pedal para controlar la elevación de la camilla



MEDIDAS

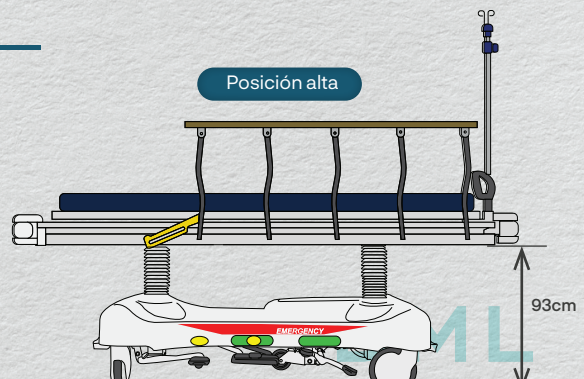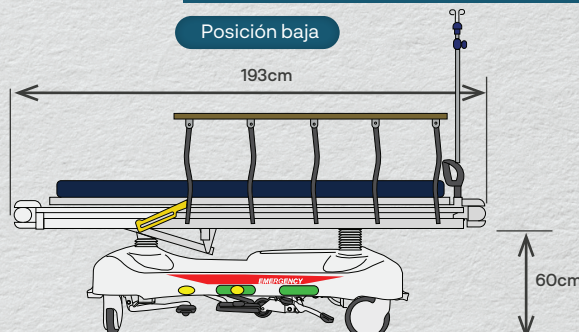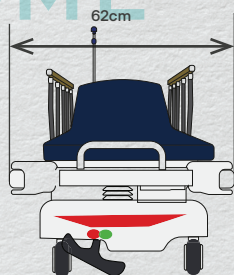

Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

TRENDELEMBURG

EMERGENCY


La camilla dispone de un pedal de tres pasos que permite controlar las posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg invertido. Al accionar este pedal, se ajusta la inclinación de la camilla, facilitando cambios rápidos entre ambas posiciones. Esto es útil para optimizar la atención en situaciones médicas específicas.



FRENO DE RUEDAS



El freno de pedal en la camilla facilita el uso, ya que permite inmovilizarla de forma rápida y segura con un simple movimiento del pie, sin necesidad de agacharse, garantizando mayor control y estabilidad en situaciones críticas.

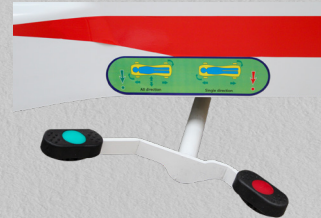

Al presionar el pedal, se puede habilitar o bloquear el desplazamiento hacia los lados, facilitando un manejo seguro y preciso. Proporcionando un mejor control durante el traslado.

ALTURA

La camilla está equipada con un pedal que permite controlar su altura de manera fácil y precisa. Al presionarlo, se puede ajustar la elevación de la camilla según las necesidades del paciente o del personal médico. Esto facilita un manejo ergonómico y cómodo en diferentes procedimientos.



APLICACIONES



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com