

CAMILLA AUTOMÁTICA CONVERTIBLE EN SILLA DE RUEDAS A6

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una camilla automática convertible en silla de ruedas es un equipo médico versátil diseñado para facilitar el traslado de pacientes. Permite el **cambio rápido de camilla a silla de ruedas**, optimizando el espacio y reduciendo el esfuerzo del personal médico durante el transporte. Es **ideal en situaciones de emergencia** o en espacios clínicos donde se necesita rapidez y eficiencia. Este equipo también aumenta la seguridad del paciente al **evitar transferencias innecesarias, disminuyendo riesgos de lesiones**.

MATERIALES

- Cuerpo de aluminio de alta resistencia
- Ruedas de goma de uso rudo de 125 mm de diámetro
- Colchón impermeable vulcanizado de 5cm de espesor

COLORES

- | | | |
|---|--|---|
| Colchón | Estructura | Ruedas |
|  Naranja |  Aluminio |  Negro |

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Barandales abatibles para protección del paciente.



Cuenta con 5 posiciones ajustables.



Puede ser operada fácilmente por una persona.



Capacidad de carga 180 kg.



Incluye 3 piezas de cinturón para: pecho, caderas y rodillas.



El mecanismo de las patas se controla por la agarradera de el lado derecho.



Respaldo puede ajustarse a un ángulo máximo de 65° por pistón.



Con capacidad de convertirse en silla de ruedas.



La camilla se asegura a la ambulancia por el sujetador que incluye.



Peso neto 39 kg.



Cuenta con 6 ruedas, 2 de ellas incluyen freno.



Altura de carga es ajustable de 25 - 85 cm para que entre en diferentes tipos de ambulancias.



POSICIONES

Posición baja

Posición alta.

Posición de silla que permite ajuste de respaldo y reposapiés.



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681




www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarterenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.

MEDIDAS

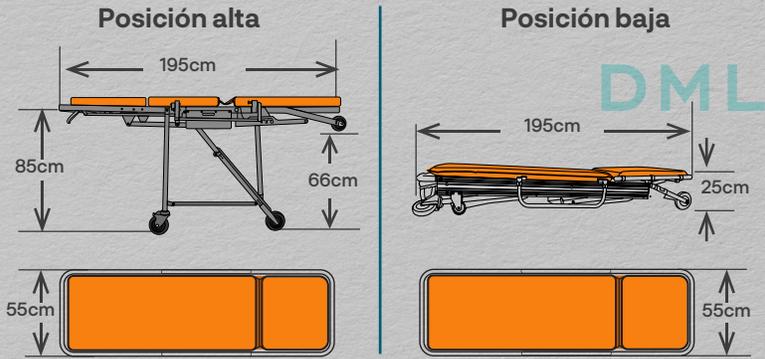

ACCESORIOS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com